

技术参数

参数名称	TH-1200 (单通道)	PFI 10 (多通道)
检测光源	荧光365nm	
检测卡类型	可检测单联卡或双联卡	
检测通量	1个检测卡 (单通道)	5个检测卡(多通道)
检测时间	样品检测用时<10秒	快速检测15秒; 恒温孵育15-20分钟, 可调节
反应温度	室温	37°C恒温反应 (独家)
定量	可定量检测, 根据荧光值判定样品的强弱	
计时功能	反应时间可根据不同项目进行设置	
自动读取	反应结束后, 仪器自动读取结果, 无需人工干预	
废物回收	无回收废料盒	1个回收废料盒, 试机卡检测完成自动退料到废料盒, 满盒自动报警
打印	内置热敏打印纸	
软件操作	7寸TFT彩屏	10.1寸触摸大屏, 无需外接电脑, 家族式操作系统
仪器尺寸	256x220x130mm	300 x400x220mm
仪器重量	3KG	7KG

链接全球高端技术 服务人类生命健康

LINK THE GLOBAL HIGH-END TECHNOLOGY
TO SERVE HUMAN LIFE AND HEALTH

深圳市亿立方生物技术有限公司 SHENZHEN YILIFANG BIOTECH CO.,LTD.

地址: 深圳市南山区高新中一道10号生物孵化器2-309

深圳市坪山区宝山路16号海科兴战略新兴产业园B栋9楼01区

电话: 400-8063168 0755-86962192

邮箱: info@yilifangbio.com


网址: www.yilifangbio.com



亿立方生物
YILIFANG BIOTECH



量子点荧光免疫分析仪

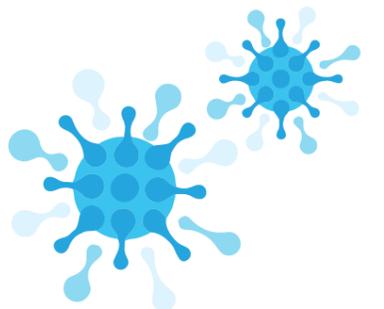

轻便快速的荧光免疫检测平台

荧光层析试纸判读仪与适配的基于荧光免疫层析法的特定干式试剂配套，供人体样本的免疫荧光检测用。可应用于医疗机构的中心实验室、门/急诊化验室、临床科室和其他医疗服务点（如社区医疗点）、体检中心等，也适用于科研实验室。



TH-1200

干式荧光免疫分析仪具有自动进料系统，操作时只需将处理完成的检测卡放入卡槽，系统将自动完成孵育并报告结果，实现人机分离，告别传统操作繁琐、容易逾时检测等烦恼。可满足基层社区医院，临床科室，急诊科室，检验科的多种使用环境。



PFI 10

简单的操作方式

只需把样本加入试剂卡，即可让仪器自动完成计时温育，自动检测获得结果，非专业检验科人员也能轻松完成操作。



第一步加入样本



第二步放入试剂卡



第三步显示结果

集成式联检试剂卡

应用All in one以病种为中心的组合检测理念，最多6个靶标联合同时检测。



TH-1200产品优势

- A 快 速: 单个样品检测用时<10秒;
- B 高准确度: 测试不同浓度质控卡, 结果判读准确;
- C 重复性好: 检测同一阳性质控卡10次, 荧光值T/C变异系数CV≤10%。;
- D 稳定性强: 仪器开机长时间运行后, 运行稳定、无故障;
- E 定 量: 可定量检测, 根据荧光值判定样品的强弱。

PFI 10产品优势

- A 轻便, 占地面积小;
- B 大容量, 5通道同时检测;
- C 双模式检测, 15秒即可读取检测结果, 适用于多样本测试; 亦可自动计时检测, 无需人工值守;
- D 选配扫码枪, 连接医院Lis/His系统, 轻松一扫, 样本信息自动转入系统, 快捷方便;
- E 操作简便, 非检验科人员也能轻松完成操作;
- F 定 量: 可定量检测, 根据荧光值判定样品的强弱。